KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germania
+0049-[0]7433-9933-0
+0049-[0]7433-9933-149
info@kern-sohn.com

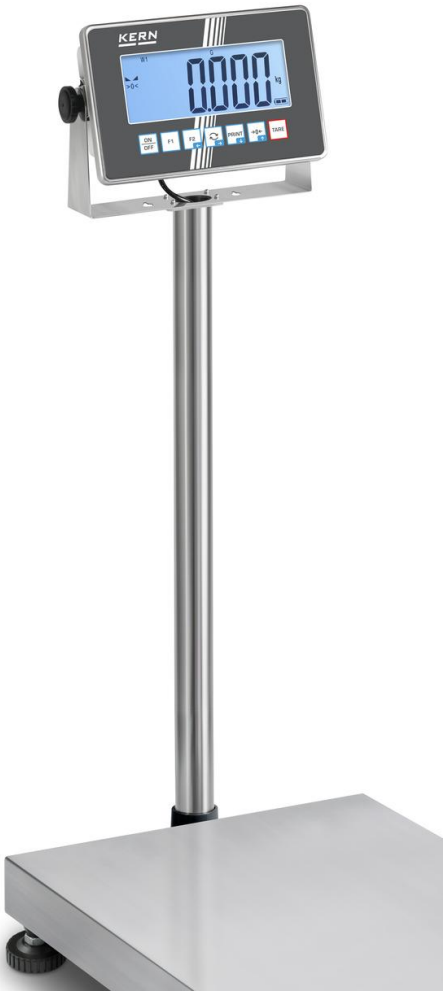
Istruzioni di installazione Treppiedi

KERN SXC, IXC

Tipo TSXC-A01-A
TIXC-A01-A
TIXC-A02-A

Versione 2.0
2026-06
it





it

Treppiedi

Versione 2.0 2026-06

Istruzioni di installazione

Indice

1 Dati tecnici 3

1.1 Dimensioni 3

2 Contenuto della fornitura 6

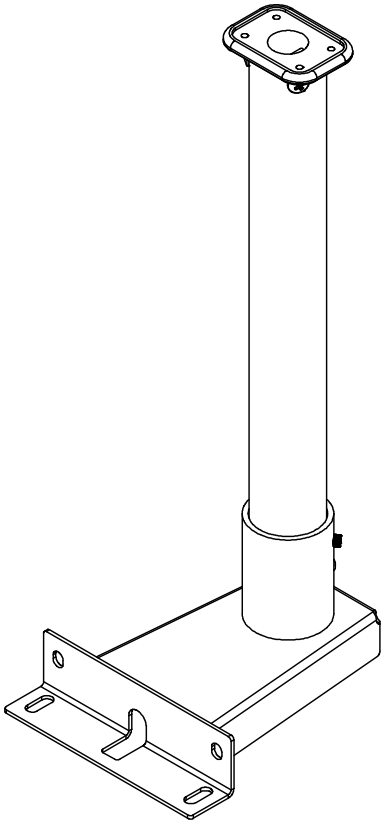
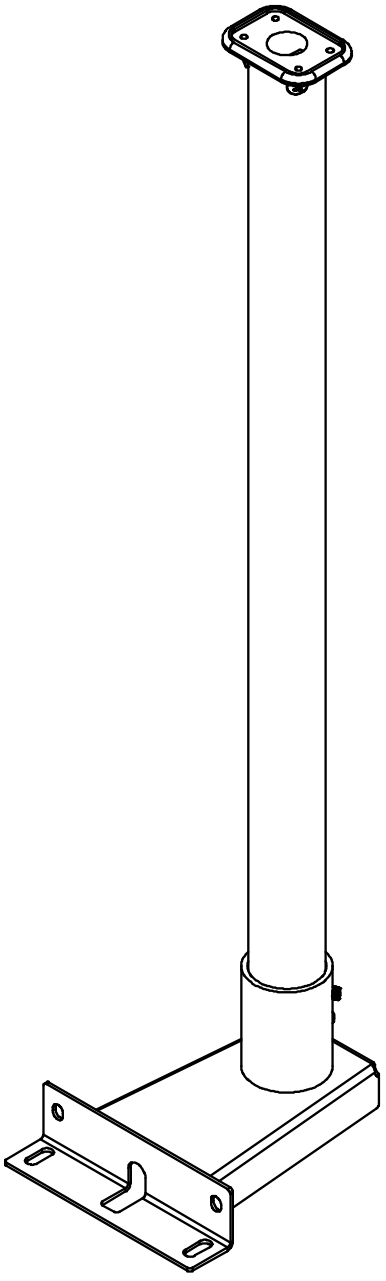
3 Installazione 7

1 Dati tecnici

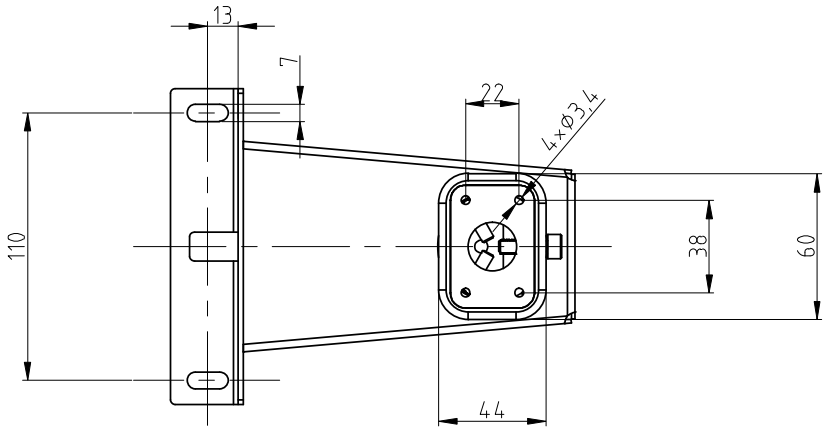
KERN	TSXC-A01-A	TIXC-A01-A	TIXC-A02-A
Altezza treppiede (mm)	330	330	600

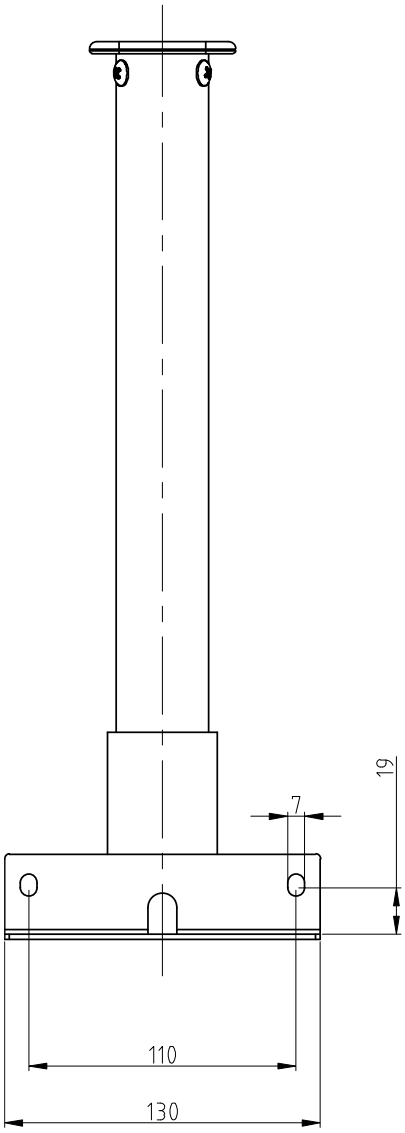
1.1 Dimensioni

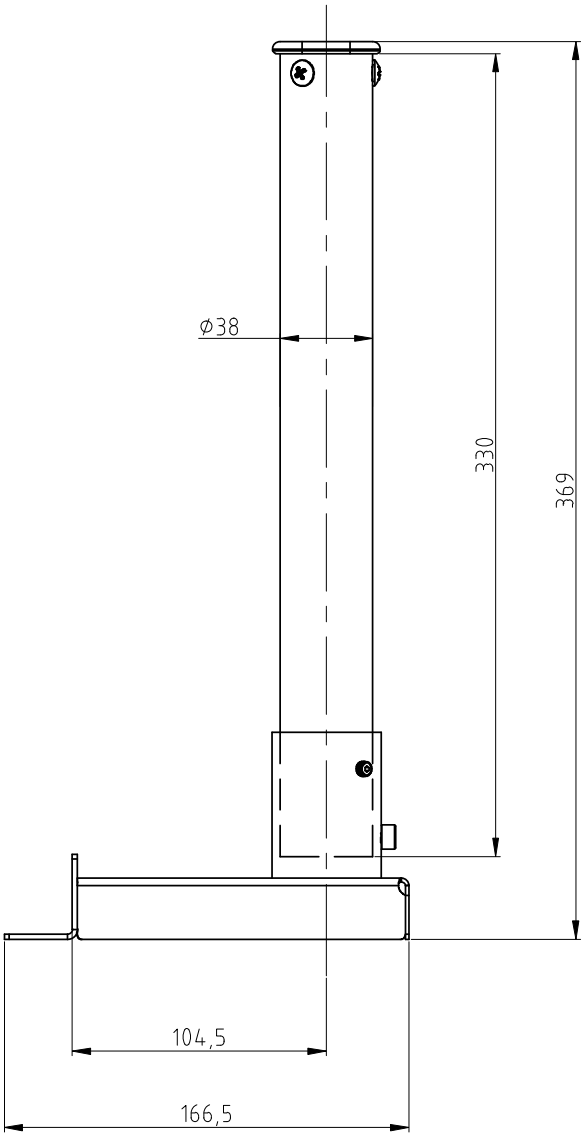
- Dimensioni in mm
- Disegni nella pagina seguente

Modelli da 330 mm	Modelli da 600 mm
	

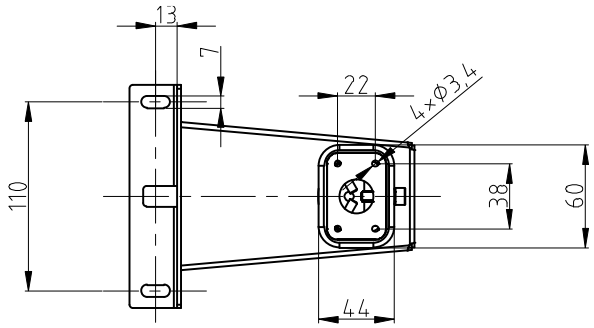
Modelli da 330 mm:

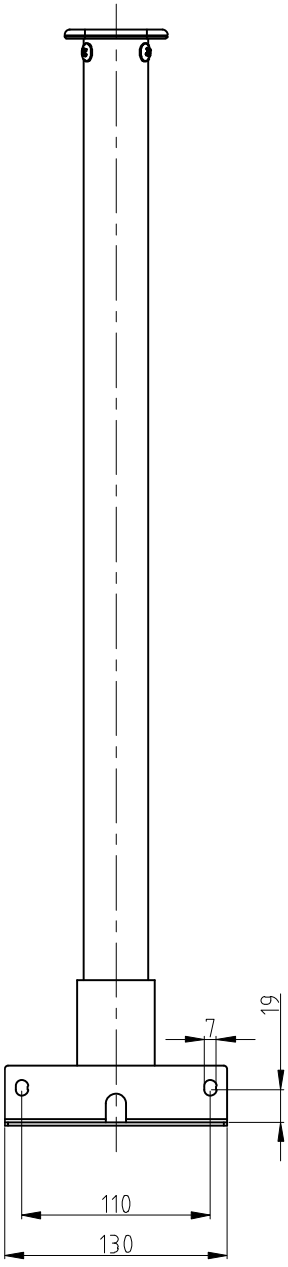


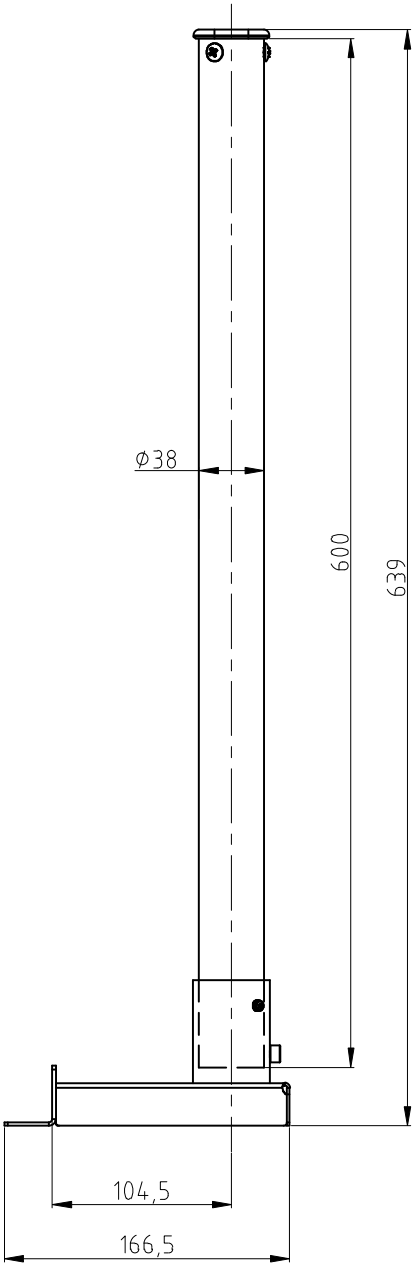




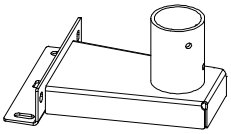
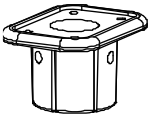
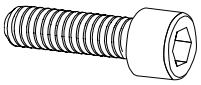
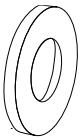
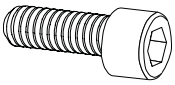
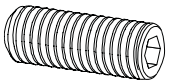
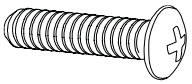
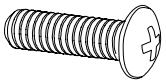
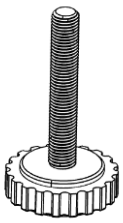
Modelli da 600 mm:







2 Contenuto della fornitura

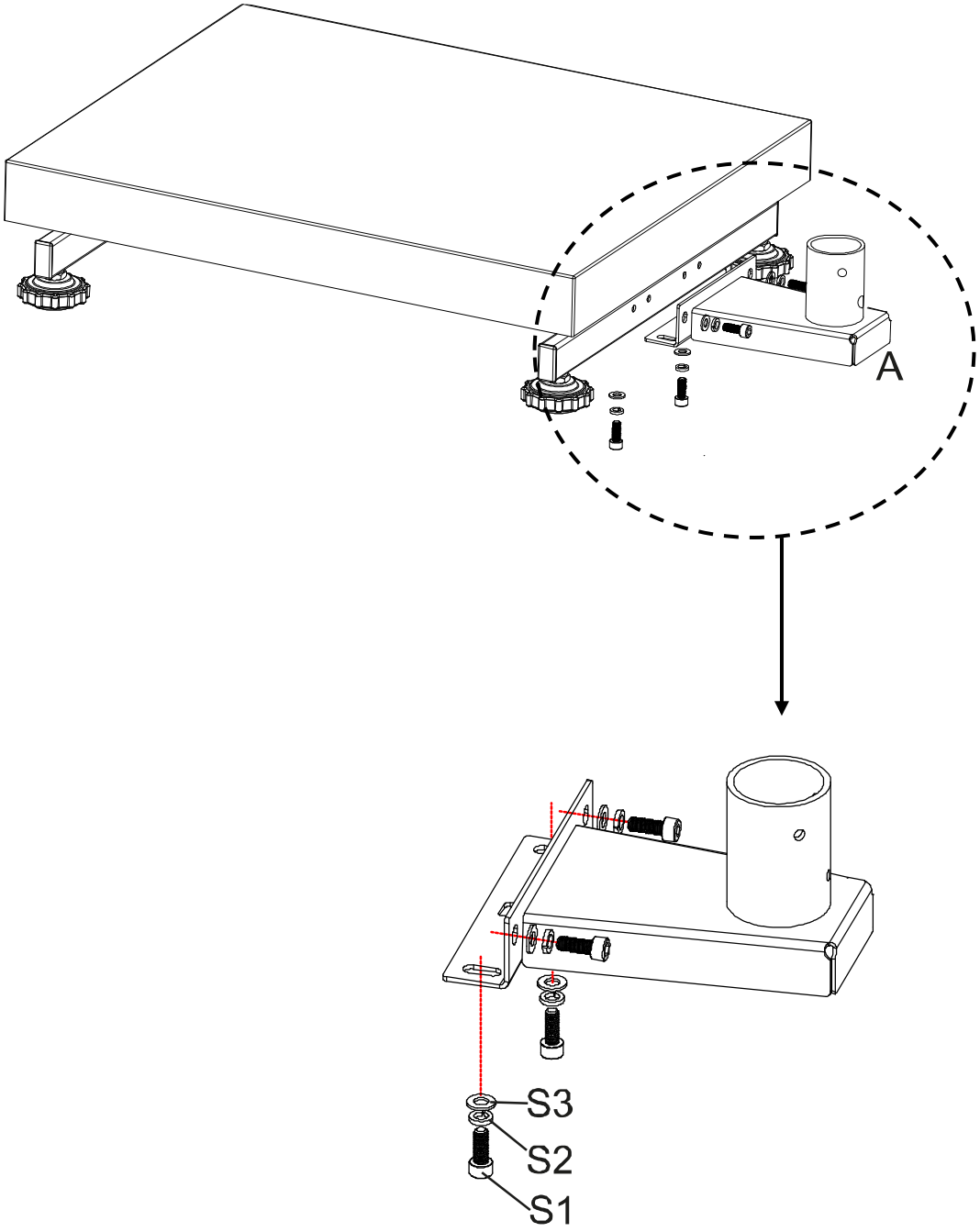
 **A** Base del treppiede 1 x	 **B** Tubo del treppiede 1 x	 **C** Supporto per dispositivo di visualizzazione 1 x
 **S1** M6 x 16 4 x	 **S2** Rondella elastica 4 x	 **S3** Rondella 4 x
 **S4** M6 x 12 1 x	 **S5** M6 x 10 2 x	 **S6** M5 x 16 3 x
 **S7** M4 x 10 4 x	 **S8** Piede regolabile 1 x	 **S9** Dado M6 1 x

3 Installazione

Fissaggio della base del treppiede alla piattaforma:

1. Posizionare la base del treppiede **(A)** al centro sopra i fori sul lato della piattaforma.
2. Inserire prima la rondella elastica **(S2)** e poi la rondella piana **(S3)** sulla vite **(S1)** (4 x).
3. Avvitare saldamente il piede del treppiede.

   Assicurarsi di non intrappolare o danneggiare alcun cavo.

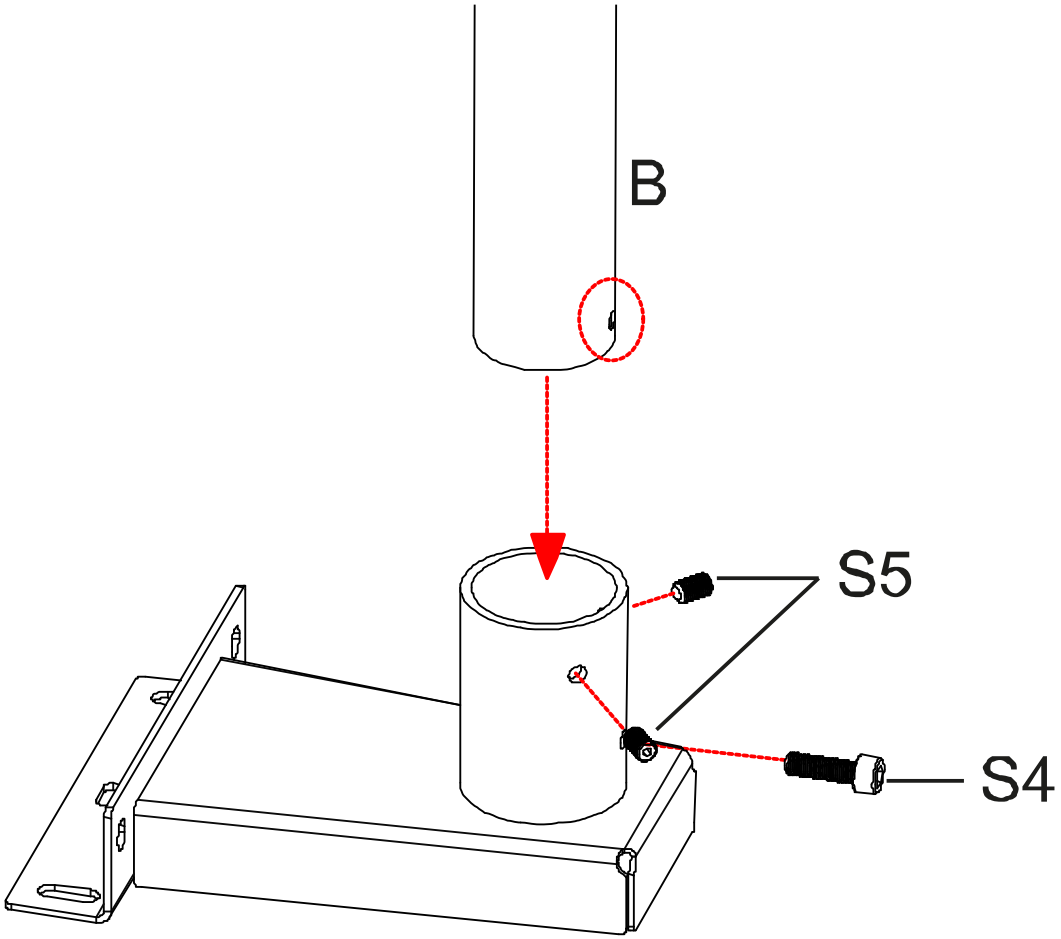


Montaggio del tubo del treppiede sulla base del treppiede:

4. Svitare le viti **S4** e **S5** dal tubo del treppiede.

5. Inserire il tubo del treppiede **(B)** nella base del treppiede. Assicurarsi che il foro del tubo del treppiede coincida con il foro **S4**.

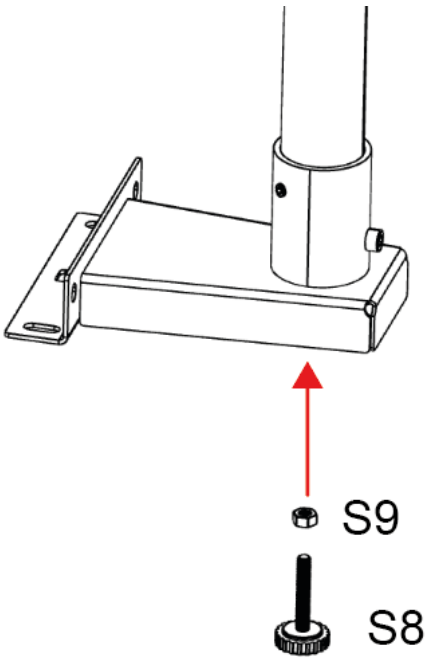
6. Riavvitare le viti **S5** e fissare il tubo del treppiede con la vite **S4**.



7. Avvitare il dado **S9** sul piedino **S8**.

8. Avvitare il piedino di regolazione con il dado dal basso nel tubo del treppiede.

9. Svitare il piedino di regolazione fino a quando non tocca il pavimento e fissarlo con il dado **S9**.



Montaggio del dispositivo di visualizzazione sul tubo del treppiede:

10. Inserire il supporto per il dispositivo di visualizzazione **(C)** nel tubo del treppiede e fissarlo con le viti **S6**.

11. Fissare il dispositivo di visualizzazione al supporto con le viti **S7**.

