



Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

Multifunktionale Baby- und Kleinkindwaage mit Eltern-Kind-Funktion

Merkmale


- **1** 2-in-1-Funktion: Kombi-Waage mit abnehmbarer Babywiegeschale, nutzbar als Babywaage und Personenwaage bis 100 kg
- Große, ergonomisch optimierte Liegefläche zum sicheren Wiegen von Säuglingen
- Unempfindliche Kunststoff-Liegefläche
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Eltern-Kind-Funktion: Ein Elternteil wiegt sich zuerst allein, danach gemeinsam mit dem Kind. Das Gewicht des Kindes wird automatisch angezeigt
- Differenzfunktion zur Berechnung der Gewichtszunahme vor und nach der Nahrungsaufnahme
- Hold-Funktion: Bei unruhig liegenden bzw. stehenden Personen wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt
- Automatische Displayrotation: Anzeige dreht sich ab 20 kg zum optimalen Ablesen bei Nutzung als Personenwaage
- Berührungsempfindliche Touchtasten für einfache Handhabung
- Integrierte AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
- Einheitenumschaltung von kg auf lb möglich

Technische Daten

- LCD-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Abmessungen Liegefläche B×T 600×295 mm
- Abmessungen Wägeplattform ohne Babywiegeschale, B×T×H 230×230×40 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 600×354×91,5 mm
- Batterien inklusive, 3x 1,5V AAA, Betriebsdauer bis zu 51 h
- Nettogewicht ca. 1,6 kg

Hauptanwendungsbereiche

- Private Haushalte
- Apotheken

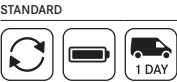

Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit
	[Max] kg	[d] kg
KERN		
MBF 100K-2	20 100	0,01 0,05